


THE LUMINARIST

DEESSE

SPECTRUM MASK

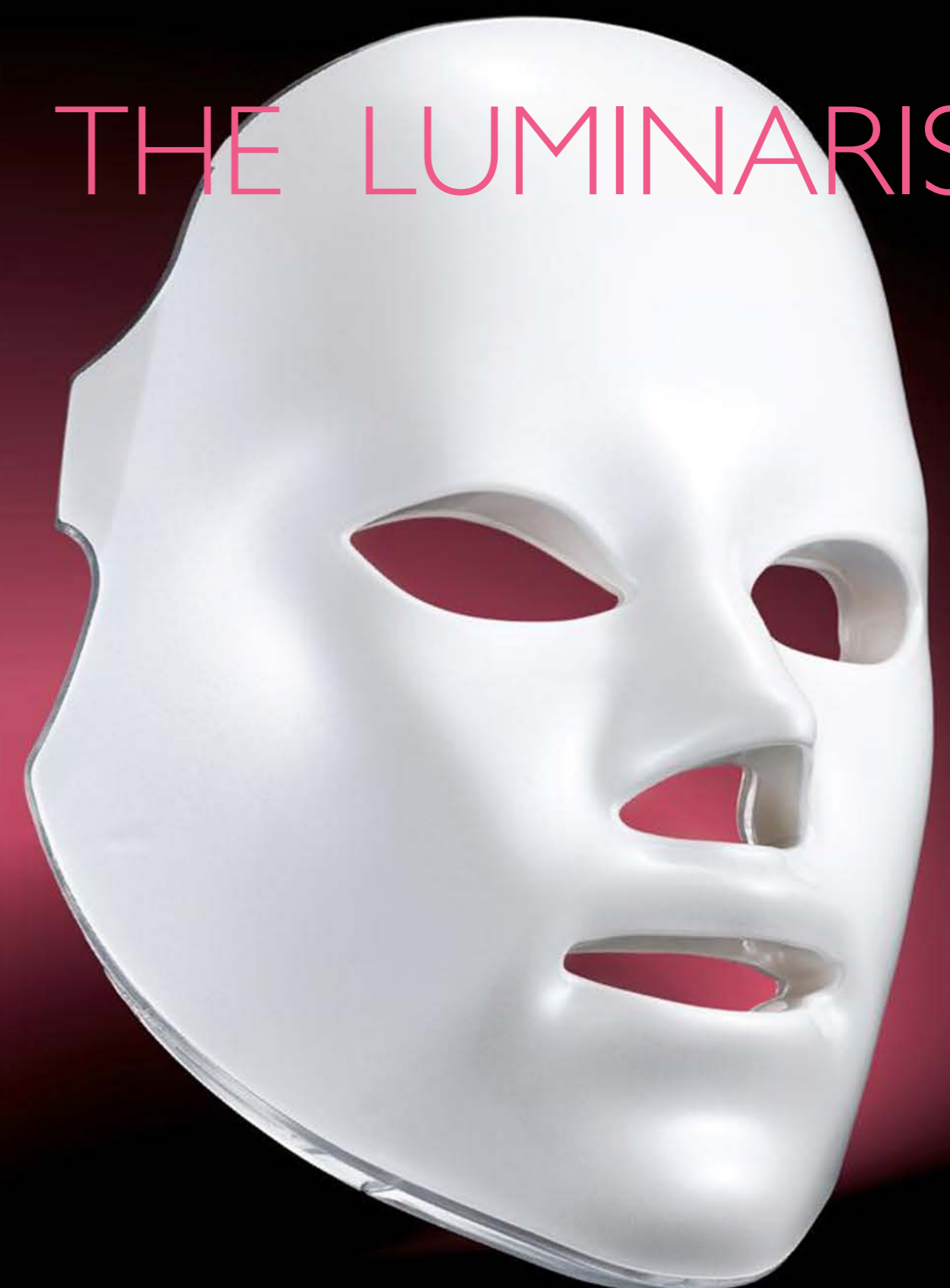

Wave Length	415nm/630nm/830nm/Low frequency
Output intensity	415nm : 6mW/cm2
	630nm : 12mW/cm2
	830nm : 30mW/cm2
LED Quantity	165 pcs for each wave length (Total 495pcs)
Setting time	Max 60 minutes
Low Frequency	833Hz ~ ±10%
Voltage & Power consumption	100~240VAC 50/60Hz, Max 20W



Dispositivi Medicali

Via L. Leoni, 34
36100 - Vicenza (VI)
Tel. e fax +39 0444 300899
Cellulare. +39 3939330906
info@altairsystem.it
www.altairsystem.it

DEESSE

SPECTRUM MASK

ESSERE PIÙ VICINO ALLA PELLE

SENZA ECCESSIVO CALORE E SCOTTATURE

Esistenti LED ad alta Potenza, a volte possono creare un eccessivo abbagliamento e scottature anche a bassa temperatura, in modo da ridurre la perdita di Potenza, dovuta alla distanza dalla pelle.

Viceversa, Deesse masl è un grado di fornire più energia per area (in quanto ha la forma di una faccia) irradiando raggi del fascio di bassa potenza in modo strettamente efficace.

in particolare, 415nm Blue-rays di breve lunghezza d'onda ha più vantaggi sull'efficacia.



Spectrum Mask con 3 lunghezze d'onda

Mode 1 630nm+830nm
Continuous On/Off time:5 min.



630nm

Mode 2 415nm+830nm
Continuous On/Off time:5 min.



415nm

Mode 3 630nm+415nm+830nm
Interval: 630+830nm:1 min. > 415+830nm:1min. > 830+415nm:3min.



830nm

Mode 4 Additional function : 833Hz
Low frequency stimulator



Applicazioni

- **415nm** Acne, effetto Antimicrobico
8mW/cm²
- **630nm** Postcare dopo il laser o trattamento con aghi
12mW/cm² Ringiovanimento, schiarimento
- **830nm** Processo di cicatrizzazione, Ringiovanimento
30mW/cm² circolazione sanguinea
- **Low frequency stimulator** Rughe e Lifting

Vantaggi

- Leggero e facile da trasportare
- Prezzo molto competitivo rispetto ad altri LED
- Possibilità di irradiare da vicina la pelle senza scottare comparata ad altri LED

